

SIM Micro Cannula "Slow Reaction"

Cannule di aspirazione in acciaio
complete di manipo con controllo di aspirazione Ø 1,5 mm

Caratteristiche

- Il foro di controllo dell'aspirazione ha un diametro di 1,5 mm, questo consente al chirurgo di avere una risposta molto più lenta. Quando il foro viene aperto, la diminuzione della aspirazione in punta avviene in modo progressivo nel tempo. Anche in caso di pressioni di aspirazione relativamente elevate queste cannule mantengono una bassa rumorosità.
- Punta arrotondate atraumatiche.
- Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale.
- Diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula.
- Angolate.
- Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in materiale plastico.
- Codice colore per un immediato riconoscimento.
- Non contengono lattice.
- Sterilizzate a raggi gamma.
- Confezionamento in doppio involucro: blister sterile esterno, sacchetto protettivo interno.
- Ordine minimo 240 pz. (o multipli).



CE
0425

CLASSE IIa

REGOLA 6

CND A06010103

STERILE R

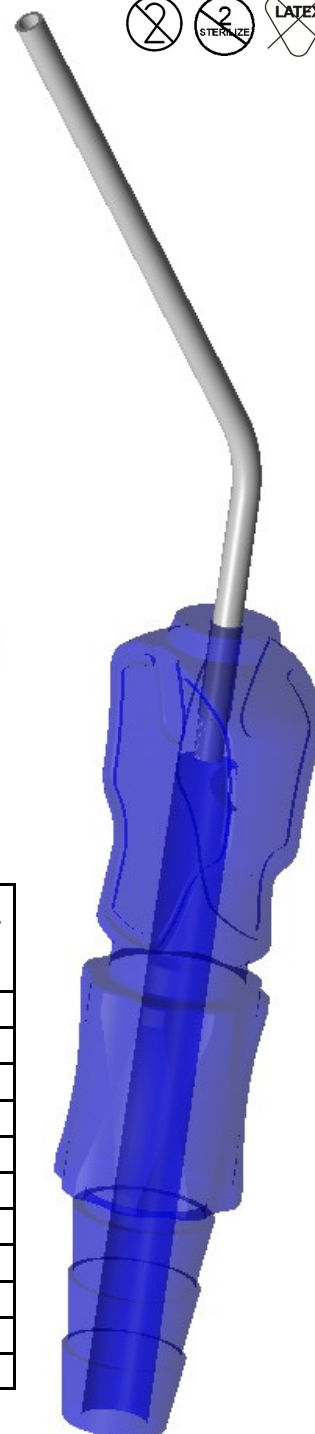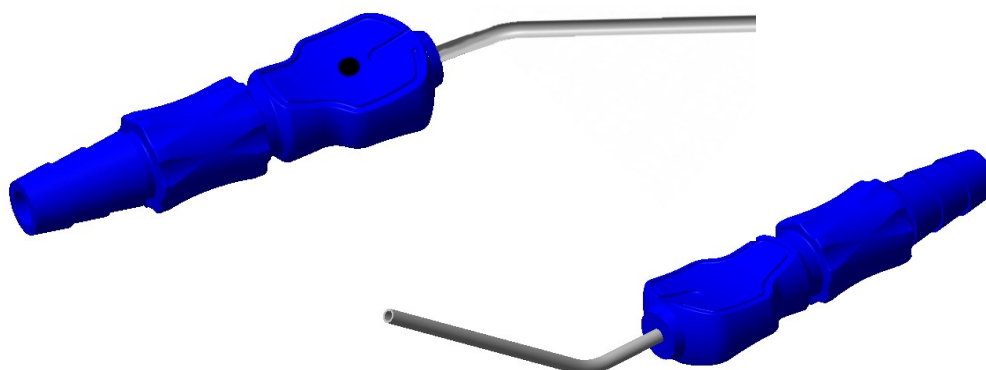

Codice	RDM	Diametro interno mm	Diametro esterno mm	CH	Lunghezza complessiva cannula mm	Colore manipo	Pz. per box
CSSR10Z70*	2419939/R	0,7	1	3	70	CREMA	60
CSSR14Z70*	2419938/R	0,96	1,4	4	70	BIANCO	60
CSSR20Z80*	2419932/R	1,45	2,0	6	80	VERDE	60
CSSR20Z130*	2419929/R	1,45	2,0	6	130	VERDE	60
CSSR20Z160*	2419935/R	1,45	2,0	6	160	VERDE	60
CSSR30Z80*	2419933/R	2,54	3,0	9	80	BLU	60
CSSR30Z130*	2419930/R	2,54	3,0	9	130	BLU	60
CSSR30Z160*	2419936/R	2,54	3,0	9	160	BLU	60
CSSR40Z80*	2419934/R	3,0	4,0	12	80	BIANCO	60
CSSR40Z130*	2419931/R	3,0	4,0	12	130	BIANCO	60
CSSR40Z160*	2419937/R	3,0	4,0	12	160	BIANCO	60

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it


47

Revisione del 28.08.2026

SIM Micro Cannula


Cannule di aspirazione in acciaio

complete di manipo con controllo di aspirazione sagomato a goccia

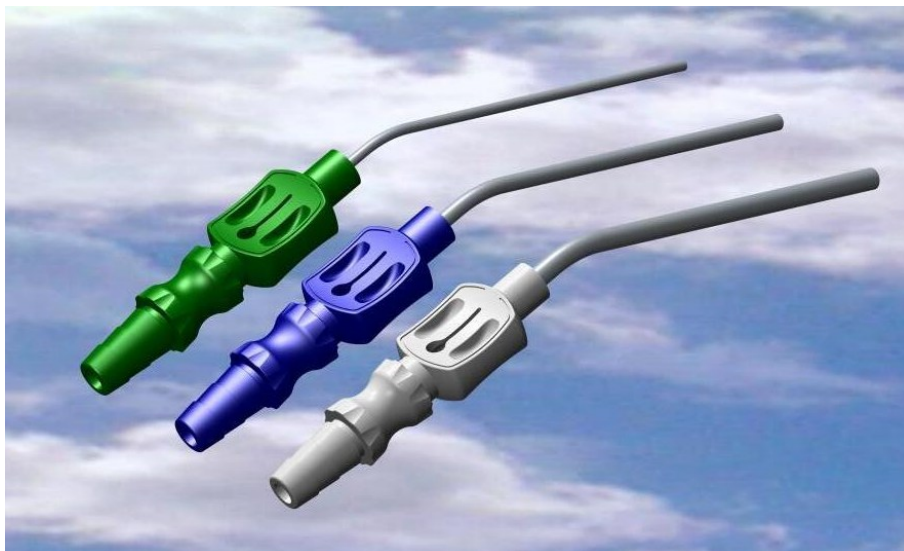

Caratteristiche

- Il foro di controllo dell'aspirazione ha forma sagomata a goccia, questo consente al chirurgo di controllare con grande precisione la pressione di aspirazione. Quando il foro viene aperto, la diminuzione dell'aspirazione in punta avviene in modo progressivo nel tempo.
- Punte arrotondate atraumatiche.
- Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale.
- Diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula.
- Angolate.
- Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in materiale plastico.
- Codice colore per un immediato riconoscimento.
- Non contengono lattice.
- Sterilizzate a raggi gamma.
- Confezionamento in doppio involucro: blister sterile esterno, sacchetto protettivo interno.
- Ordine minimo 240 pz. (o multipli).

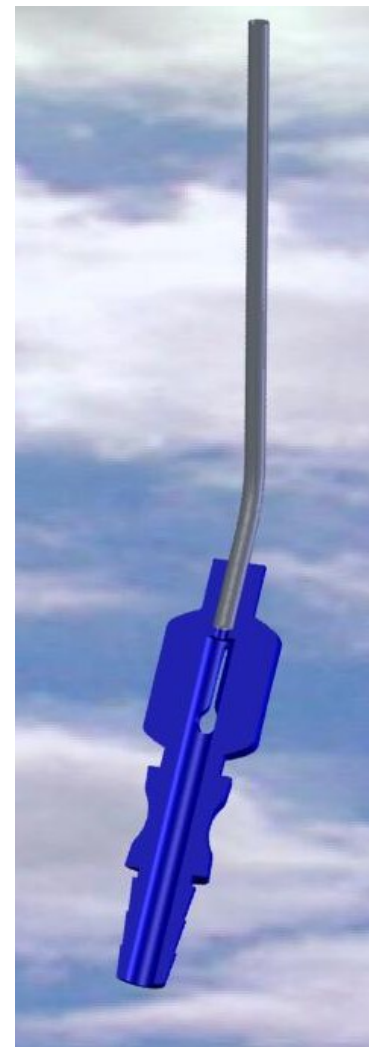

Spaccato del manipo

Codice	RDM	Diametro interno mm	Diametro esterno mm	CH	Lunghezza complessiva cannula mm	Colore manipo	Pz. per box
CSSR14G90	2420162/R	0,96	1,4	4	90	BIANCO	60
CSSR14G130*	2420163/R	0,96	1,4	4	130	BIANCO	60
CSSR20G80	2420164/R	1,45	2,0	6	80	VERDE	60
CSSR20G130	2420165/R	1,45	2,0	6	130	VERDE	60
CSSR20G160	2420166/R	1,45	2,0	6	160	VERDE	60
CSSR30G80	2420167/R	2,54	3,0	9	80	BLU	60
CSSR30G130	2420168/R	2,54	3,0	9	130	BLU	60
CSSR30G160	2420169/R	2,54	3,0	9	160	BLU	60
CSSR40G80	2420170/R	3,0	4,0	12	80	BIANCO	60
CSSR40G130	2420171/R	3,0	4,0	12	130	BIANCO	60
CSSR40G160	2420172/R	3,0	4,0	12	160	BIANCO	60

CE


0425

CLASSE IIa

REGOLA 6

CND A06010103

STERILE R

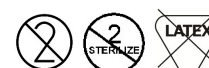

* Prodotto non a magazzino
e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

48

Revisione del 28.08.2026

SIM Micro Cannula "Duck Tip"

Cannule di aspirazione in acciaio
con punta distale schiacciata e forata
complete di manipolo con controllo di aspirazione Ø 1,5 mm




CLASSE IIa

REGOLA 6

CND A06010103

STERILE R

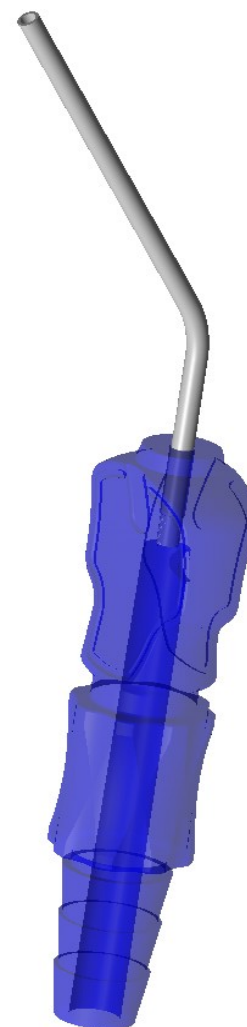

Spaccato del manipolo

Caratteristiche

- Il foro di controllo dell'aspirazione ha un diametro di 1,5 mm, questo consente al chirurgo di avere una risposta molto più lenta. Quando il foro viene aperto, la diminuzione dell'aspirazione in punta avviene in modo progressivo nel tempo. Anche in caso di pressioni di aspirazione relativamente elevate queste cannule mantengono una bassa rumorosità.
- Punta schiacciate ed arrotondate atraumatiche.
- Presentano 2 fori distali per ridurre i traumi sui tessuti.
- Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale.
- Diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula.
- Angolate.
- Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in materiale plastico.
- Codice colore per un immediato riconoscimento.
- Non contengono lattice.
- Sterilizzate a raggi gamma.
- Confezionamento in doppio involucro: blister sterile esterno, sacchetto protettivo interno.
- Ordine minimo 240 pz. (o multipli).

Codice	RDM	Diametro interno mm	Diametro esterno mm	CH	Lunghezza complessiva cannula mm	Colore manipolo	Pz. per box
CSSR30D130*	2420204/R	2,54	3,0	9	130	BLU	60
CSSR30D160*	2420205/R	2,54	3,0	9	160	BLU	60
CSSR40D130*	2420206/R	3,0	4,0	12	130	BIANCO	60
CSSR40D160*	2420207/R	3,0	4,0	12	160	BIANCO	60

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

49



Revisione del 28.08.2026

Kit di aspirazione

Cannule di aspirazione in acciaio complete di manipolo con controllo di aspirazione sagomato a goccia e tubo di connessione in silicone completo di cono di collegamento

Caratteristiche

- Manipolo in materiale plastico, con foro di controllo aspirazione sagomato a goccia per consentire al chirurgo di controllare con grande precisione la pressione di aspirazione: quando il foro viene aperto, la diminuzione dell'aspirazione in punta avviene in modo progressivo nel tempo.
- Codice colore per un immediato riconoscimento.
- Cannule in acciaio AISI 304 medicale, con punte arrotondate atraumatiche, angolate, diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula.
- Complete di tubo di connessione in silicone lunghezza 60 cm., dotato ad una estremità di cono di fissaggio in plastica rigida e nell'altra estremità di funnel in silicone.
- Non contengono lattice.
- Sterili a raggi gamma.
- Confezionati in doppia busta.

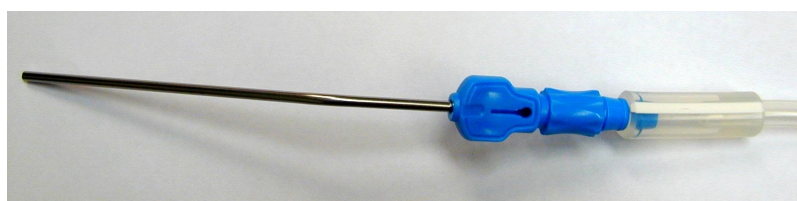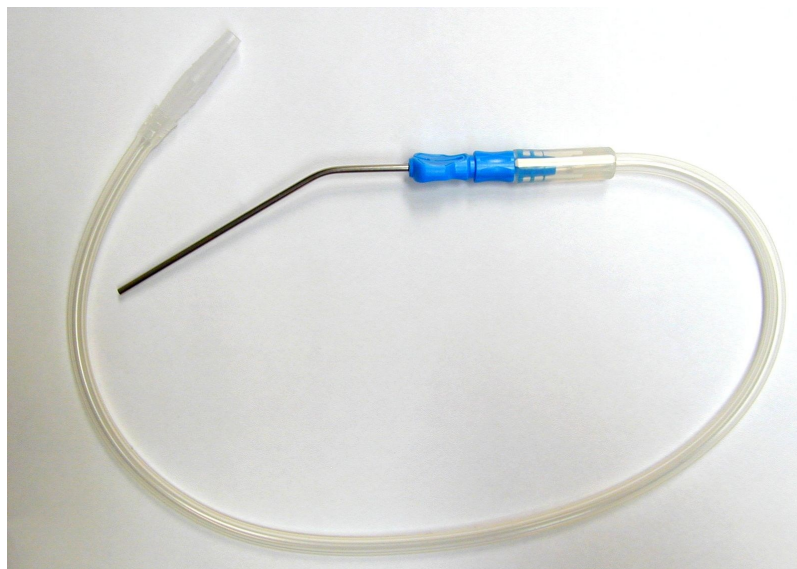

CLASSE IIa

REGOLA 6

CND A06010103

STERILE R



Codice cannula + tubo di connessione	RDM	Diametro interno mm	Diametro esterno mm	CH	Lunghezza complessiva cannula in mm	Colore manipolo	Pz. per box
KIT G01*	2420434/R	0,96	1,4	4	90	BIANCO	20
KIT G02*	2420435/R	1,45	2,0	6	80	VERDE	20
KIT G03*	2420436/R	2,54	3,0	9	80	BLU	20
KIT G04*	2420437/R	3,0	4,0	12	80	BIANCO	20
KIT G05*	2420438/R	0,96	1,4	4	130	BIANCO	20
KIT G06	2420439/R	1,45	2,0	6	130	VERDE	20
KIT G07	2420440/R	2,54	3,0	9	130	BLU	20
KIT G08	2420441/R	3,0	4,0	12	130	BIANCO	20
KIT G09	2420442/R	1,45	2,0	6	160	VERDE	20
KIT G10	2420443/R	2,54	3,0	9	160	BLU	20
KIT G11	2420444/R	3,0	4,0	12	160	BIANCO	20

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:




Società certificata
 UNI CEI EN ISO 13485:2021
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

50

Revisione del 26.02.2025

Cannule e kit di aspirazione

Cannule di aspirazione in acciaio fenestrate complete di manipo con controllo di aspirazione sagomato a goccia e tubo di connessione in silicone completo di cono di collegamento

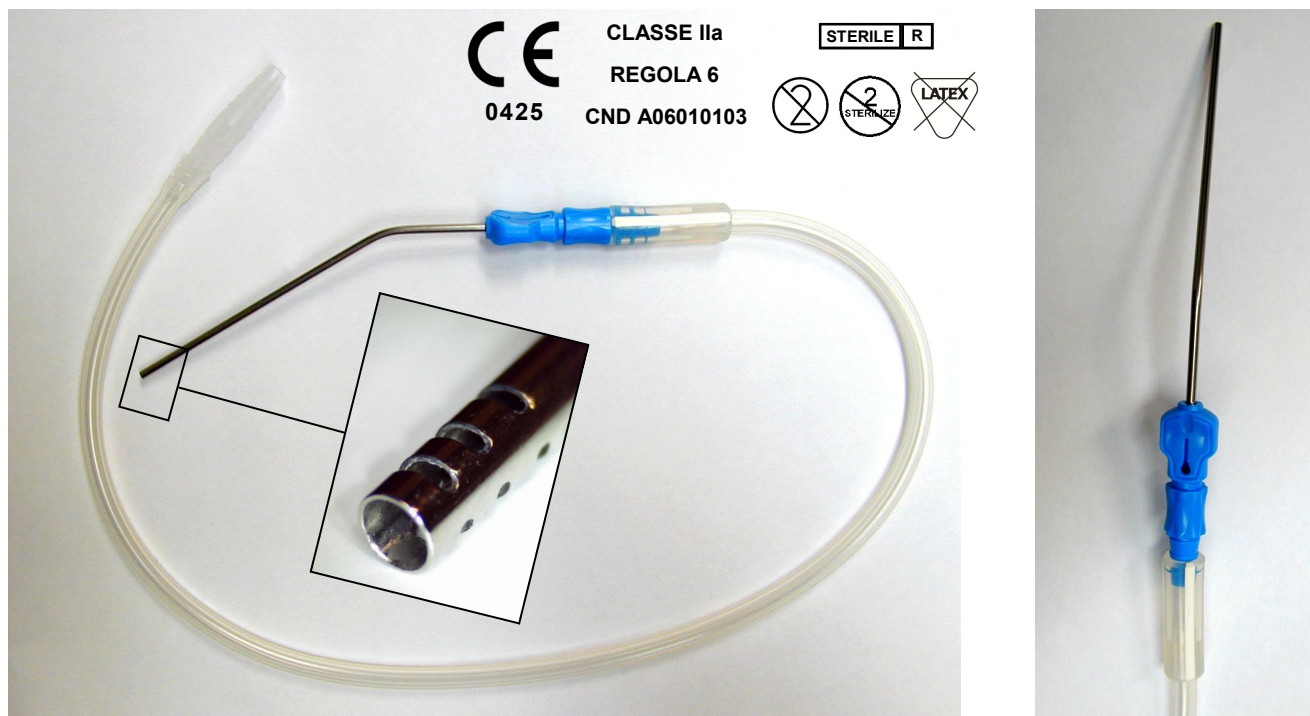

Caratteristiche

- Manipo in materiale plastico, con foro di controllo dell'aspirazione sagomato a goccia, per consentire al chirurgo di controllare con grande precisione la pressione di aspirazione: quando il foro viene aperto, la diminuzione dell'aspirazione in punta avviene in modo progressivo nel tempo.
- Codice colore per un immediato riconoscimento.
- Le cannule, angolate e in acciaio AISI 304 medicale, presentano 6 finestre laterali distali per ridurre i traumi sui tessuti, punte arrotondate atraumatiche, diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula.
- Disponibili in kit complete di tubo in silicone lunghezza di connessione 60 cm, dotato ad una estremità di cono di fissaggio in plastica rigida e nell'altra estremità di funnel in silicone.
- Non contengono lattice.
- Sterili a raggi gamma.
- Confezionamento in doppio involucro: blister sterile esterno e sacchetto protettivo interno (cannule); doppia busta sterile (kit).

Codice cannula	RDM	Ø int. mm	Ø est. mm	CH	Lungh. complessiva cannula in mm	Colore manipo	Box Pz.
CSSR20F150*	2420340/R	1,45	2,0	6	150	VERDE	60
CSSR30F150*	2420350/R	2,54	3,0	9	150	BLU	60
Codice Cannula + tubo di connessione	RDM	Ø int. mm	Ø est. mm	CH	Lungh. complessiva cannula in mm	Colore manipo	Conf. Pz.
KIT G12*	2420529/R	0,96	1,4	4	150	BIANCO	20
KIT G13*	2420530/R	1,45	2,0	6	150	VERDE	20
KIT G14*	2420531/R	2,54	3,0	9	150	BLU	20

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING


Società certificata
 UNI CEI EN ISO 13485:2021
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

51

Revisione del 28.08.2026

Cannule bottonute

Cannule di aspirazione in acciaio con punta bottonuta complete di manipolo con controllo di aspirazione Ø 1,5 mm

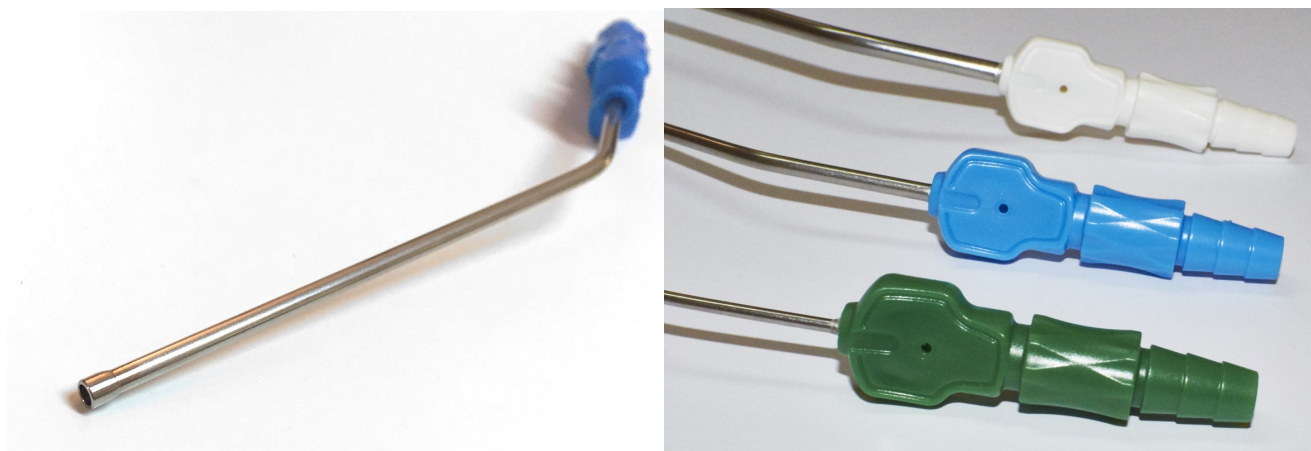

CLASSE IIa
REGOLA 6
CND A06010103



Caratteristiche

- Il foro di controllo dell'aspirazione ha un diametro di 1,5 mm, questo consente al chirurgo di controllare con grande precisione la pressione di aspirazione. Quando il foro viene aperto, la diminuzione dell'aspirazione in punta avviene in modo progressivo nel tempo.
- Presentano punte bottonute distali per ridurre i traumi sui tessuti.
- Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale.
- Angolate, con diametro interno uniforme sull'intera lunghezza della cannula.
- Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in materiale plastico.
- Codice colore per un immediato riconoscimento.
- Non contengono lattice.
- Sterilizzate a raggi gamma.
- Confezionamento in doppio involucro: blister sterile esterno, sacchetto protettivo interno.
- Ordine minimo 240 pz. (o multipli).

Codice cannula	RDM	Diametro interno, mm	Diametro esterno, mm	CH	Lunghezza complessiva cannula in mm	Colore manipolo	Box Pz.
CSSR20Y130*	2420208/R	1,45	2,0	6	130	VERDE	60
CSSR20Y160*	2420210/R	1,45	2,0	6	160	VERDE	60
CSSR30Y130*	2420209/R	2,54	3,0	9	130	BLU	60
CSSR30Y160*	2420211/R	2,54	3,0	9	160	BLU	60
CSSR40Y130*	2420212/R	3,0	4,0	12	130	BIANCO	60
CSSR40Y160*	2420213/R	3,0	4,0	12	160	BIANCO	60

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it