

# Med-X Ray Drain

Catetere di drenaggio in silicone con linea radiopaca

## Scopo

Drenaggio intraoperatorio in silicone.

## Caratteristiche

Prodotto in morbido silicone, biocompatibile e idrorepellente.

Particolarmente usati nella chirurgia addominale e toracica, questa tipologia di drenaggi si caratterizza per la diversa gamma di diametri, lunghezze ed estensioni della parte perforata.

## Specifiche

- Confezionati singolarmente in doppia busta
- Box da 20 pezzi
- Monouso
- Sterili a raggi gamma
- Privi di lattice



CLASSE IIa

REGOLA 7

CND A0601010402


STERILE R



|                                                                                     | Ø interno mm | Ø esterno mm | Numero fori | Ø fori mm | Shore | CH esterno | Codice (lung. tubo 70 cm) | RDM       | Codice (lung. tubo 50 cm) | RDM       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|  | 3,35         | 5,5          | 8           | 4         | 62    | 15         | A03350550C6T              | 2695039/R | A03350550C6R              | 2695038/R |
|  | 3,18         | 6,35         | 8           | 4         | 62    | 19         | A03180635C6T              | 2695037/R | A03180635C6R              | 2695036/R |
|  | 5            | 7            | 8           | 5         | 62    | 21         | A05000700C6T              | 2695043/R | A05000700C6R              | 2695042/R |
|  | 4,8          | 7,9          | 8           | 5         | 62    | 24         | A04800790C6T              | 2695041/R | A04800790C6R              | 2695040/R |
|  | 6,4          | 9,5          | 8           | 7         | 62    | 30         | A06400950C6T              | 2695045/R | A06400950C6R              | 2695044/R |
|  | 6,4          | 11           | 8           | 8         | 62    | 33         | A06401100C6T              | 2695048/R | A06401100C6R*             | 2695047/R |
|  | 7,9          | 12,7         | 8           | 8         | 62    | 36         | -                         | -         | A07901270C6R              | 2695049/R |

\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

### Determinazione del REF:

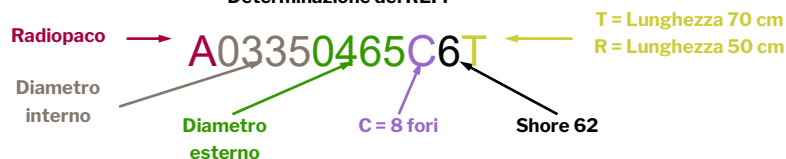

Distribuito da:

**Sim italia s.r.l.**  
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata  
 UNI CEI EN ISO 13485:2021  
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850  
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

29

Revisione del 26.02.2025

# Med-X Ray Drain Torax

## Catetere di drenaggio in silicone con linea radiopaca

### Scopo

Drenaggio intraoperatorio in silicone, avente fori di sezione tronco conica, linea radiopaca ed estremità a becco di flauto.

### Caratteristiche

Prodotto in morbido silicone, biocompatibile e idrorepellente. Particolarmente usati nella chirurgia toracica, questa tipologia di drenaggi si caratterizza per la diversa gamma di diametri, lunghezze ed estensioni della parte perforata.

### Specifiche

- Confezionati singolarmente in doppia busta
- Box da 20 pezzi
- Monouso
- Sterili a raggi gamma
- Privi di lattice




CLASSE IIa  
REGOLA 7



CND A0601010402


I fori presenti nel drenaggio hanno sezione tronco conica, i tessuti si adattano sui fori minimizzando il rischio di essere incorporati nel drenaggio.

Al momento della rimozione del drenaggio i tessuti scivolano facilmente riducendo i rischi di trauma e rendendo molto più agevole la rimozione del drenaggio.

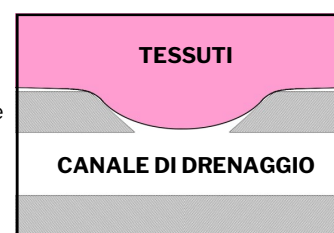

Disegno atraumatico dei fori

| Ø int. mm | Ø est. mm | Numero fori | Ø fori mm | Shore | CH esterno | Codice (lunghezza tubo 80 cm) | RDM       |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-------|------------|-------------------------------|-----------|
| 6,4       | 9,5       | 18          | 7         | 62    | 30         | A06400950H6S                  | 2695046/R |
| 7,9       | 12,7      | 18          | 8         | 62    | 36         | A07901270H6S                  | 2695050/R |

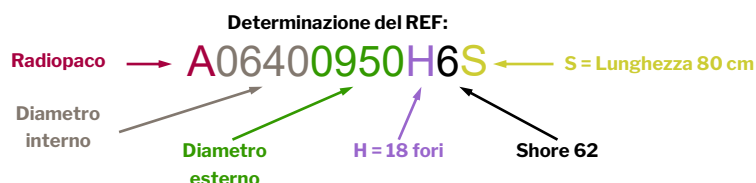

Distribuito da:



Società certificata  
 UNI CEI EN ISO 13485:2021  
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850  
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

30

Revisione del 26.02.2025