

Sistema di drenaggio a bassissima pressione



BREVETTATO


Bulbo in PVC dotato di valvola di non ritorno consente di eliminare rapidamente l'aria presente nel circuito ed attivare così una aspirazione a bassissimo vuoto

Al drenaggio

Filtro idrofobico uscita aria

Filtro idrofobico 2 μ

Valvola di non ritorno

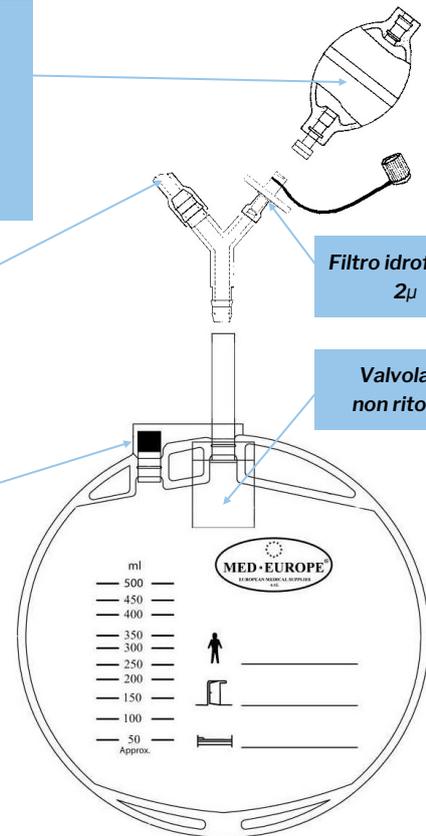

Caratteristiche

- Il sistema di drenaggio a bassissima pressione si fonda sul principio fisico di rimozione dell'aria presente nel circuito e della conseguente attivazione della aspirazione a bassissima pressione. Tale funzione viene ottenuta utilizzando un bulbo dotato di valvola di non ritorno che, applicato sul filtro antibatterico ad elevata efficienza, permette dopo poche e rapide attivazioni la rimozione dell'aria dal circuito. Svolta questa funzione, il bulbo può essere rimosso ed il filtro sigillato utilizzando l'apposito tappo luer. La pressione massima che il bulbo esercita è di 140 mmHg, quella media di lavoro è di 70mmHg. Un bulbo SIM BULB viene fornito in ogni scatola.
- La sacca di drenaggio da 500ml con valvola di non ritorno è stata studiata per ridurre il rischio di occlusioni nel tubolare di ingresso.
- Fissaggio al letto del paziente tramite doppio gancio.
- Il tubo di collegamento lungo 900mm dotato di morbido connettore, tagliabile per adattarsi a vari diametri, consente un'ampia gamma di connessioni.
- In dotazione 3 connettori di differente misura.

Codici

DBP-001* Sistema di drenaggio a bassissima pressione
 Box da 10 pezzi sterili + 1 SIM BULB non sterile
CND A0680 - RDM 2694495/R

Specifiche

- Sacca da 500 ml in PVC
- Bulbo e connettore in PVC
- Tubo di collegamento da 900mm in PVC
- Connettore distale in PVC
- Raccordo a Y in materiale stirenico
- Filtro idrofobico in PVC
- Connettori in dotazione in materiale plastico
- Dispositivo sterile a raggi gamma
- Privo di lattice
- Confezionati in doppia busta sterile.



CLASSE Is
 REGOLA 1



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI CEI EN ISO 13485:2021
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

46

Revisione del 26.02.2025