


NeuroVac

Sistema di drenaggio chiuso a bassa pressione con drenaggio in silicone J. Pratt

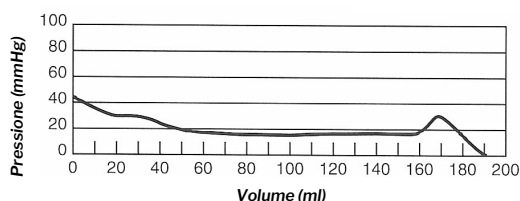

CE
0482

CLASSE IIa



Descrizione

Il NeuroVac è un sistema di drenaggio delle ferite ideato da J. Pratt per l'utilizzo nelle aree di chirurgia plastica, ricostruzione mammaria, chirurgia toracica e addominale, otorinolaringoiatria e arti. Presenta i seguenti 6 vantaggi:

- Alta compatibilità con il tessuto.**
 Il tubo di drenaggio in silicone minimizza il pericolo di aderenza ai tessuti e necrosi. Questo facilita la cicatrizzazione della ferita.
- Sistema anti-infezione.**
 Il sistema di drenaggio a circuito chiuso consente di prevenire l'insorgere di infezioni. Una infezione retrograda in espansione sarà minimizzata grazie alla valvola fra il tubo di drenaggio e il palloncino. Inoltre, una continua, debole, pressione è sempre presente (circa 40/20 mm Hg).
- Radiopaco.**
 Una linea radiopaca indica la posizione del drenaggio. Il controllo della posizione del drenaggio tramite raggi X risulta essere estremamente facilitato.
- Minori ostruzioni.**
 Una costruzione speciale del lume e la composizione dell'elastomero in silicone riduce il problema di adesione fibrinosa o della ostruzione dovuta a grumi ematici.
- Trasportabile.**
 La deospedalizzazione anticipata del paziente è facilitata, poiché il sistema di drenaggio è molto leggero.
- Forma piatta.**
 Poiché il tubo di drenaggio è piatto, l'inserimento anche nei campi ristretti (ad esempio il viso nella chirurgia plastica) sarà meno traumatica, ma efficace e semplice. Una costruzione appropriata delle pareti del tubo mantiene aperto il lume anche in aspirazione.

Specifiche

- Tubo di drenaggio prodotto in silicone e solfato di bario radiopaco.
- Palloncino da 150 cc., prodotto in silicone, apertura palloncino in polipropilene, dotato di valvola anti-reflusso.
- Confezione in busta di carta/polietilene.
- Prodotto sterile monouso.

Prodotto	Codice	Misura	Lunghezza totale drenaggio	Lunghezza parte perforata	Imballo Pz./Box	RDM	CND
Tubo di drenaggio	23-0734*	7 x 3 mm	80 cm	15 cm	20	2485651/R	A0601010403
	23-1034*	10 x 4 mm	80 cm	15 cm	20	2485698/R	
Tubo di drenaggio	23-0711	7 x 3 mm	80 cm	20 cm	20	1829945/R	A0601010403
	23-1011	10 x 4 mm	80 cm	20 cm	20	1829952/R	
Palloncino	20-1500	150 cc	-	-	5	1829979/R	A060399

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

38

Revisione del 29.05.2026