

Medi Strip - estrattore di varici

Scopo

Per la rimozione transluminale delle vene varicose superficiali dagli arti inferiori.

Filo flessibile ricoperto in FEP

L'alta flessibilità del filo ricoperto in FEP facilita il passaggio nelle valvole venose e minimizza il numero delle incisioni. Il filo ricoperto, poiché liscio, garantisce un passaggio facile e atraumatico nelle vene ed una rimozione veloce e senza problemi.

Grande resistenza elastica del filo

Una delle caratteristiche più importanti del filo di acciaio inossidabile ricoperto in FEP è la sua elasticità. La massima tensione in trazione è di 30 Kg.

Libero da torsioni e nodi

Lo strumento monouso è esente da torsioni ed inginocchiamenti. Questo garantisce un'applicazione rapida ed atraumatica.

Quattro misure in uno strumento


L'estrattore di varici viene fornito con quattro diverse olive in policarbonato di diametro esterno 6, 9, 12 e 15 mm. Questo consente di estrarre le varici di diverse misure con un unico strumento con conseguente riduzione dei costi.

Estrazione anterograda e retrograda

Lo speciale design delle ogive consente dopo il passaggio attraverso la vena, di collegarle indifferentemente a ciascuna delle estremità del filo, permettendo una estrazione retrograda così come anterograda indipendentemente dall'accesso distale o prossimale.

Pratica maniglia

La maniglia in policarbonato, consente una impugnatura pratica ed ergonomica. Essa assicura una rimozione pratica ed efficace delle vene. Appena prima dell'estrazione la maniglia può essere posizionata indifferentemente all'estremità distale o prossimale del filo.

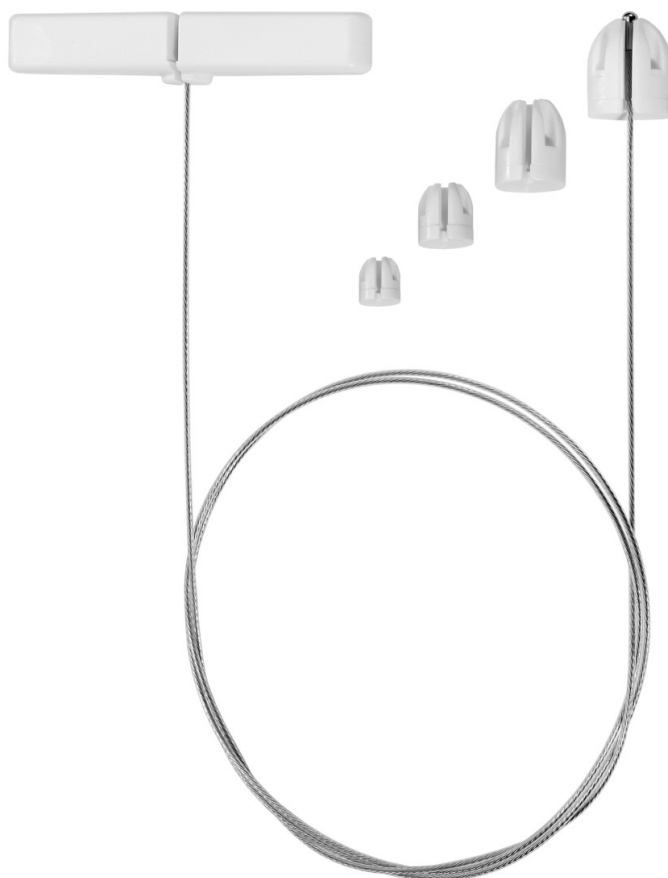

Specifiche

- Filo: lunghezza 100 cm, in acciaio inossidabile, radiopaco, rivestimento in FEP.
- Maniglia: in policarbonato, larghezza 8 cm.
- Ogive: in policarbonato.
- Confezionamento in doppia busta.

Codice

01.3200 Estrattore di varici - box da 10 pz.

CND C01901901 - RDM 1836824/R

PRODOTTO AD ESAURIMENTO

CE
0482

CLASSE IIa
STERILE EO



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

22

Revisione del 26.02.2025